


ΛΑΒΉ KEELER C

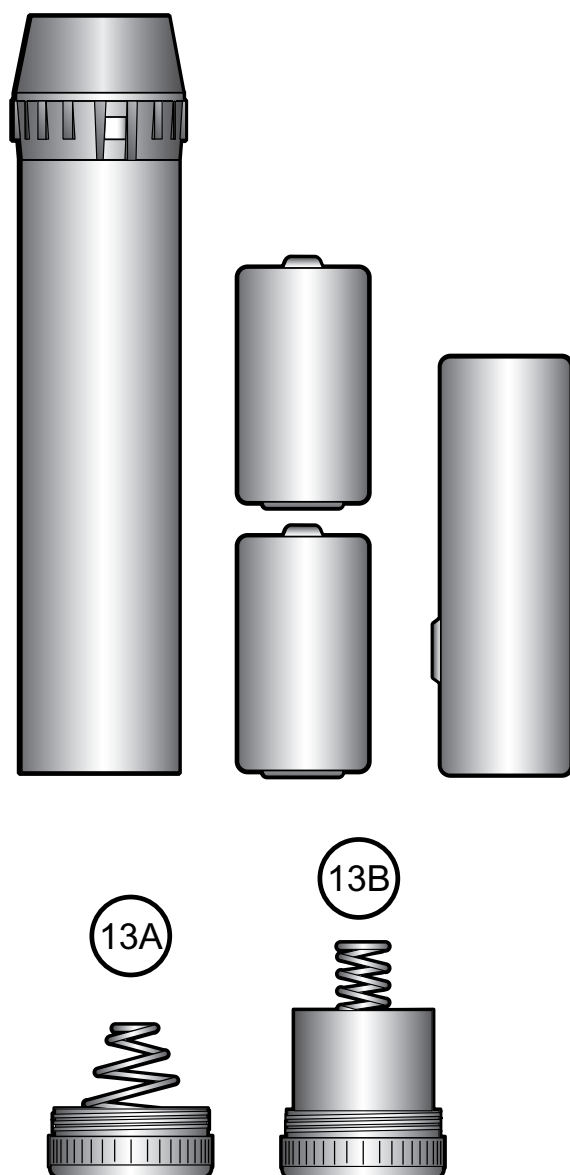

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ**

 **Keeler**

Λαβή Keeler C

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler.

Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και των πελατών σας παρατηρήστε όλες τις προειδοποιητικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στο παρόν παράρτημα. Οι ακόλουθες πληροφορίες σκοπεύουν να τονίσουν πιθανούς κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με κακή χρήση ή βλάβη του προϊόντος.



Προειδοποίηση

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εφόσον υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.

Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη μπαταρία. Μέσα, δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επιδιορθωθούν.

Μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά, Μην την τρυπήσετε .

Μην χρησιμοποιήσετε μπαταρία η οποία έχει παραμορφωθεί, στάζει, έχει σκουριάσει ή φαίνεται χαλασμένη.

Εάν το προϊόν εκπέμπει μία περίεργη μυρωδιά, θερμότητα ή καπνό, Διακόψτε αμέσως τη χρήση. Η συνεχιζόμενη χρήση ενός χαλασμένου προϊόντος ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βυθίσετε τη μονάδα σε οποιοδήποτε υγρό.

Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα εφόσον είναι χαλασμένη και ανά τακτά διαστήματα επιθεωρείτε την για ενδείξεις βλάβης.

Μόνο λαβές Keeler με κόκκινη βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Φορτιστή Keeler. Μην προσπαθήσετε να βάλετε μία λαβή Keeler με μπλε βάση σε Φορτιστές Keeler. Ανατρέξτε στην παράγραφο Αναγνώρισης λαβών και λυχνιών Keeler.

Προσοχή

Αφαιρέστε ξηρά στοιχεία μπαταρίας μετά από πολύχρονη περίοδο αποθήκευσης.

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keeler με Αρ. 1919-P-7069

Φορτίστε μόνο χρησιμοποιώντας τους φορτιστές Keeler.

Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

Μη φορτίζετε μπαταρία σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40°C ή πέφτει κάτω από 0°C.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Μην το προσαρμόζετε σε χαλασμένη έξοδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μόνο για χρήση σε κλειστό χώρο (προστατέψτε το από την υγρασία)

Για την αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας, αφήστε το προϊόν να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του χώρου πριν από τη χρήση.

Όταν συνδέετε τις κεφαλές του οργάνου με τις λαβές βεβαιωθείτε ότι η τάση της λυχνίας του οργάνου ανταποκρίνεται στην τάση της λαβής.


Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος είναι στη θέση «κλειστό/off» όταν η εξέταση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν αντικαταστείτε το επαναφορτιζόμενο στοιχείο, θέστε εκτός λειτουργίας τη λαβή και τοποθετήστε το νέο στοιχείο.

Περιβαλλοντικά


Πετάξτε τη μπαταρία εναρμονιζόμενοι με τους τοπικούς κανονισμούς που προβλέπονται για την ανακύκλωση μπαταριών.

Πριν πετάξετε τη μπαταρία, τοποθετήστε μονωτική ταινία στις επαφές της μπαταρίας για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.

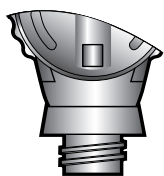

Τοποθέτηση της κεφαλής του οργάνου στη λαβή.


Η κεφαλή του οργάνου συνδέεται στη λαβή με ένα βιδωτό σπείρωμα. Για να τοποθετήσετε την κεφαλή του οργάνου, συνδέστε τη όπως φαίνεται στο σχήμα, βιδώνοντας προς τα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της κεφαλής στη λαβή είναι σταθερή.

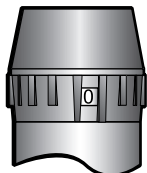

ΚΛΕΙΣΤΟ

Συμβατότητα

Τα οφθαλμοσκόπια Keeler Specialist, Professional, Standard και Practitioner, καθώς και τα αμφιβληστροσκόπια Keeler, είναι συμβατά με τις λαβές Keeler Vista 2,8 V και 3,6 V.

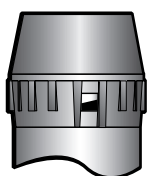


ΜΙΣΟΑΝΟΙΚΤΟ

Κουμπί φωτισμού On/Off

Για να ανάψετε το όργανο, στρίψτε το κουμπί φωτισμού δεξιά, όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να σβήσετε το όργανο, στρίψτε το κουμπί φωτισμού αριστερά, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι λαβές Keeler μεγέθους C διαθέτουν ένδειξη τροφοδοσίας. Η ένδειξη αυτή δείχνει αν το όργανο είναι αναμμένο ή σβηστό.

Κόκκινο = αναμμένο

Ασημί = σβηστό.

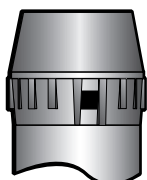

ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

Αναγνώριση λαβής

Οι λαβές Keeler μεγέθους C είναι κωδικοποιημένες με χρώμα που επισημαίνει αν η λαβή παίρνει μπαταρίες ξηρού στοιχείου (2,8 V) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (3,6 V). Αυτή η χρωματική κωδικοποίηση έχει ως εξής:

Μπλε βάση	=	μπαταρίες ξηρού στοιχείου 2,8 V.	13A
Κόκκινη βάση	=	επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,6 V.	13B

Οι λαμπτήρες Keeler είναι και αυτοί χρωματικά κωδικοποιημένοι, κατά τον ίδιο τρόπο.



Μπλε βάση = μπαταρίες ξηρού στοιχείου 2,8 V.

Κόκκινη βάση = επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,6 V.

Παρακαλούμε, όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες και λαμπτήρες, να βεβαιώνετε ότι ανταποκρίνονται στην τάση της λαβής.

Να πετάτε τις παλιές μπαταρίες με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος

Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών

Ξεβιδώστε το καπάκι των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε πάλι το καπάκι, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι μπαταρίες ξηρού στοιχείου που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Λαβή Keeler C — 2 μπαταρίες μεγέθους C 1,5 V — Duracell MN 1400 ή αντίστοιχες. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι επαναφορτιζόμενες λαβές Keeler διατίθενται κανονικά εφοδιασμένες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,6 V - 0,7 Ah Ni-Cd (Νικελίου-Καδμίου).

Αναβάθμιση λαβής από μπαταρίας σε επαναφορτιζόμενη.

Η λαβή Keeler C μπαταρίας ξηρού στοιχείου 2,8 V (μπλε βάση) μπορεί να αναβαθμιστεί σε επαναφορτιζόμενη λαβή 3,6 V (κόκκινη βάση). Για τους απαιτούμενους κωδικούς ανταλλακτικού, παρακαλούμε δείτε την ενότητα των αξεσουάρ.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο λαμπτήρας του οργάνου από 2,8 V σε 3,6 V. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το σέρβις της Keeler στο τηλέφωνο 01753 857177.

Οδηγίες Φορτίσης Για Τις Επαναφορτιζόμενες Λαβές Keeler C



Προειδοποίηση

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Συντήρηση μπαταριών

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keeler πρέπει να συντηρούνται σωστά για να αποδώσουν το μέγιστο χρόνο ζωής τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης, όπως επισημαίνεται.

Βήμα 1

Φορτίστε πλήρως τη νέα σας επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keeler. Η φόρτιση Θα χρειαστεί περίπου 15 ώρες.

Βήμα 2

Χρησιμοποιήστε το όργανο ΧΩΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΧΡΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ.

Βήμα 3

Αφού αδειάσει η μπαταρία, επαναφορτίστε την μέχρι να γεμίσει τελείως. Η φόρτιση Θα χρειαστεί περίπου 15 ώρες.

Επαναλάβετε τα βήματα 1, 2 και 3 τρεις φορές, δηλαδή, φορτίστε και εκφορτίστε πλήρως τη μπαταρία τρεις φορές για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συντήρησης.

Αφού ολοκληρώσετε τη συντήρηση των μπαταριών, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να τοποθετείτε το όργανο στο φορτιστή, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, ανάμεσα στις εξετάσεις.

Συμβατότητα φορτιστή

Οι επαναφορτιζόμενες λαβές Keeler μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους εξής φορτιστές Keeler:

Σειρά φορτιστών Vista (μονός, διπλός, κινητός)

Φορτιστής Keeler Mini

Φορτιστής Keeler Duo

Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα από τα τροφοδοτικά που αναφέρονται.

Άλλοι φορτιστές (όχι Keeler)



Προειδοποίηση

Φροντίστε να φορτίζετε τη λαβή Keeler μόνο σε φορτιστή που διοχετεύει ρεύμα περιορισμένης έντασης 65 mA.



Οι επαναφορτιζόμενες λαβές Keeler C μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους φορτιστές. Για να φορτίσετε το όργανο σε φορτιστή που δεν είναι Keeler, βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι το ρεύμα φόρτισης του φορτιστή είναι περιορισμένης έντασης 65 mA. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι στο κέντρο της βάσης, χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα. Μπορείτε τώρα να φορτίσετε τη λαβή Keeler με φορτιστή άλλου κατασκευαστή.

Οδηγίες Καθαρισμού

Ο καθαρισμός του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με το χέρι και όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα καθαρό απορροφητικό ύφασμα ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού / απορρυπαντικού (περιεκτικότητας 2%) ή διάλυμα νερού / ισοπρόπυλο αλκοόλ (περιεκτικότητας 70%).
2. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα δεν εισχωρεί μέσα στον εξοπλισμό. Προσεκτικά φροντίστε ώστε το ύφασμα να μην είναι υπερβολικά εμποτισμένο στο διάλυμα.
3. Οι επιφάνειες πρέπει προσεκτικά να στεγνωθούν με το χέρι, με ένα καθαρό απορροφητικό ύφασμα.
4. Προσεκτικά πετάξτε τα χρησιμοποιημένα υλικά καθαρισμού.

Εγγύηση & Επιδιόρθωση

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επιδιορθωθούν από το χρήστη – κάθε προληπτική συντήρηση και επιδιόρθωση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Keeler.

Ο λαβή σας Keeler έχει Εγγύηση 3-ετών και θα αντικατασταθεί ή θα επιδιορθωθεί εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε εργοστασιακό λάθος
2. Οποιαδήποτε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς του προϊόντος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ:

Keeler Limited

Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Τηλ: +44 (0)1753 857177
Φαξ: +44 (0)1753 827145
Δωρεάν Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0800 521 251

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1 800 523 5620
Τηλ: 610 353 4350
Φαξ: 610 353 7814

Η σήμανση CE επισημαίνει ότι
το προϊόν έχει ελεγχθεί και βρίσκεται
σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
που περιέχονται στην Οδηγία περί
Ιατρικών Συσκευών 93/42/ΕΟΚ



A
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Διανομέας